

湯ニットはカラダも ココロも温めてくれます。

脱衣室と浴室の段差があっても
スムーズに移動、
入浴介護もグーンと
楽になります。



NEW
より使い易く
なりました。

介護保険レンタル対象商品

明電浴室介護用リフト

バスパートナー 湯ニット

ご入浴される方、介護される方にとって脱衣場から浴室・浴槽への移動はかなりの体力が必要でした。この度、新登場のバスパートナー「湯ニット」は入浴時の負担を軽減し、ゆっくりとお風呂を楽しんでいただけるための優しさ・安全性を追求した浴室介護用リフトです。

この製品は財団法人テクノエイド協会の福祉用具研究開発助成事業金により開発したものです。

明電興産株式会社

特 長

■工事不要で取り付け簡単。

浴室を改造しなくても簡単に取付けできます。

■脱衣室と浴室の段差も苦になりません。

スライドレールで吊り上げての移動なので段差も気になりません。

■浴室内の移動は自由自在。

XY方向のレールによりスムーズな面移動を実現しました。

■コードレスリモコン付き。(日常生活防水)

コードが無いのでより介護がラクにできます。又、介護の方法に合わせたグリップ構造になっています。

■介護保険レンタル対象商品です。



BMU201




BMP201




リモコンスイッチ

使用方法

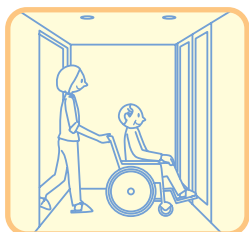

さあ！お風呂。

車いすで脱衣場に移動。

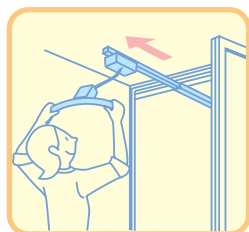

カンタン操作で…。

浴室の天井に取り付けられたレールを脱衣場まで引き伸ばす。



ラクラク！浴室へ。

リフトで介護者を吊り上げて脱衣場から浴室に移動。



自由な移動。


浴室内は横行レールで洗い場、浴槽を自由に移動。



ああ、サッパリ！

入浴後リフトとレールで脱衣場にスムーズに移動。

外形図

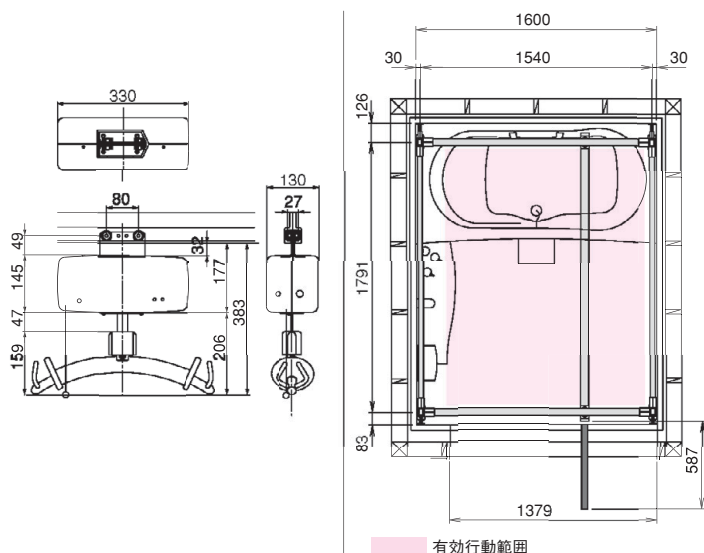

仕 様

●リフト本体

形式／型番	手動走行式電動リフト／BMU201
吊り上げ質量(最大)	100kg (150kg)
吊り上げ距離	1.4m
昇降速度	1.3 (上昇)・1.8 (下降) m/min
操作方法	コードレスリモコン (単三電池 2本)
動力電源	DC24V (バッテリー搭載)
充電器	入力電源 100V-50/60Hz 0.7A
バッテリー	シール鉛電池
充電方式	ピン端子差込充電
保護装置	■非常下降装置 ■ベルト異常検出 ■空転防止ブレーキ ■上限自動停止機能 ■充電表示機能 ■ベルト・逆巻・たるみ検出
質量	8.2kg

●レール (架台)

型 番	BU1616	BU1618 BU1816	BU1620 BU2016	BU1818	BU1820 BU2018	BU2020
移動範囲 (m)	1.4×1.4	1.4×1.6	1.4×1.8	1.6×1.6	1.6×1.8	1.8×1.8
外形寸法 (m)	2.1					
	高さ	1.6	1.6	1.6	1.8	2
	長さ	1.6	1.8	1.8	2	2
	幅	1.6	1.8	1.8	2	2
架台質量 (kg)	51	53	53	54	56	57

※お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。

※上記寸法は、浴室に合わせて調整いたします。



安全に関するご注意

ご使用の前に、「取扱説明書」又はそれに準ずる資料をよくお読みのうえ正しくお使いください。

発売元

明電興産株式会社 ケアシステム事業部

〒141-8616 東京都品川区大崎5-5-5 (明興ビル)

電話 03-3493-8641 FAX 03-3493-8660

名古屋支店 電話 052-503-7016 FAX 052-504-2785

太田支社 電話 0276-31-5773 FAX 0276-31-5412

沼津支社 電話 055-929-5714 FAX 055-929-5964

ホームページ <http://www.meidenkohsan.co.jp>

取扱店



100%再生紙を使用しています

